

Modernstes Retrofit DR-System für die Veterinär-Radiologie

Unsere hochwertigen Flachdetektoren können mit jeder bestehenden Röntgenanlage verwendet werden. Damit verwandeln Sie Ihr konventionelles Röntgengerät in ein modernes, volldigitales Röntgensystem.

Die RAYMED Retrofit-Detektoren sind leichte, portable Detektoren in Kassettengröße und in den Formaten 43×43 cm, 35×43 cm und 25×30 cm erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen einer kabelgebundenen und einer Wireless-Version.

Ein portabler Detektor bringt grösstmögliche Flexibilität in der Aufnahmetechnik. Für Aufnahmen ohne Raster kann das zu röntgende Organ direkt auf dem Detektor platziert werden. Dadurch ergibt sich keine geometrische Vergrößerung und die Bilder sind gestochen scharf.

Unsere Systeme sind komplett und bestehen aus dem Detektor, der Workstation mit dem PC, der Software und einem hochwertigen Monitor.

Die speziell auf die Ansprüche der Veterinärradiologie ausgerichtete Software bietet Ihnen die Möglichkeit der Einbindung in Ihr Praxisprogramm (BDT/GDT-Schnittstelle, DICOM-Worklist).



Technische Spezifikationen Retrofit DR-Systeme Veterinär-Radiologie

Alle Detektoren in Gadox- (Gd) oder Cäsium-Iodid-(CsI) Technologie erhältlich

Lieferumfang: Workstation, Software, DICOM-Monitor. Wireless-Systeme zusätzlich inkl. Ladestation und 2 Lithium-Akkus

Format 35 x 43

Bezeichnung	RMV3543W / RMV3543 WiFi
Pixelgrösse	140 µm
Pixelmatrix	2560 x 3072 Pixel
Bildtiefe	16 Bit
Gewicht	3,3 kg
Dimension	460 x 384 x 15 mm




Format 43 x 43

Bezeichnung	RMV4343W / RMV4343 WiFi
Pixelgrösse	140 µm
Pixelmatrix	3072 x 3072 Pixel
Bildtiefe	16 Bit
Gewicht	4,5 kg
Dimension	460 x 460 x 15 mm



Format 25 x 30

Bezeichnung	RMV2530WiFi
Pixelgrösse	124 µm
Pixelmatrix	2048 x 2560 Pixel
Bildtiefe	16 Bit
Gewicht	2,2 kg
Dimension	350 x 287 x 15 mm

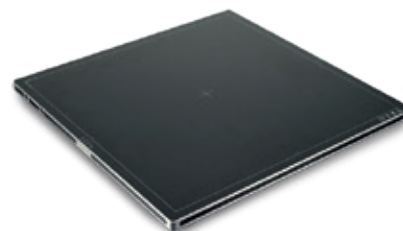

W = kabelgebunden (wired) WiFi = kabellos (wireless)

Technische Änderungen vorbehalten

Weitere interessante Produkte:



RAYVET-DR
komplett integriertes
DR-System



VET-MRI (ESAOTE)



CR-Systeme (Fuji, Agfa)



Raymed Imaging AG

Industriestrasse 12 | 3186 Düringen
Tel. 058 433 03 03 | Fax 058 433 03 10
info@raymed.com | www.raymed.com

Service und Logistik:

Raymed Imaging AG
Grenzstrasse 1A | 6214 Schenkon
Tel. 058 433 03 33

